


поставлять материал

- испытательная карточка
- стерильный ватный тампон
- экстракционная труба с буфером и крышкой согла
- Подставка для трубки
- руководство пользователя

Метод сбора образцов (4in1)


- 1) Передне-носовой мазок
- 2) Мазок из носоглотки (рекомендуемый метод)
- 3) мазок из ротоглотки
- 4) Слюна (Lolly-Test)

1) Передне-носовой мазок

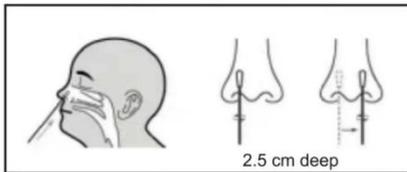


- 1) Поместите экстракционную пробирку в картонную подставку для пробирок.
- 2) Осторожно введите тампон в ноздрю пациента. Кончик тампона следует вводить на глубину до 2,5 см от края ноздри.
- 3) Протрите слизистые оболочки ноздрей, чтобы обеспечить сбор слизи и клеток.
- 4) Поверните тампон несколько раз, медленно и осторожно удалите тампон из ноздри. Не прикасайтесь к верхней части ватного тампона

2) Мазок из носоглотки

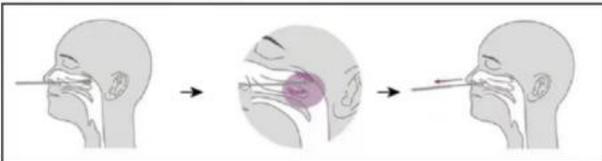

- 1) Поместите экстракционную пробирку в картонную подставку для пробирок.
- 2) Слегка наклоните голову пациента назад. Осторожно введите тампон в ноздрю пациента, чтобы добраться до задней поверхности носоглотки, где больше всего выделений.
- 3) При введении аккуратно потрите и сверните тампон. Как только вы почувствуете сопротивление глотки, остановитесь и дайте тампону впитать выделения.
- 4) Поверните тампон несколько раз, медленно и осторожно удалите тампон из ноздри.

3) мазок из ротоглотки

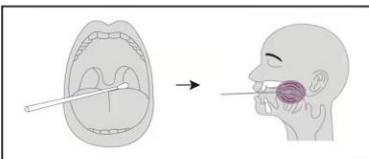


- 1) Поместите экстракционную пробирку в картонную подставку для пробирок.
- 2) Попросите больных широко открыть рот и произнести звуки «Ah», обнажая глоточные миндалины с обеих сторон.
- 3) Крепко держите тампон и протирайте глоточные миндалины с обеих сторон вперед и назад не менее трех раз с умеренной силой. не трогай верхняя челюсть, языку, зубам или деснам.
- 4) Поверните тампон несколько раз, медленно и осторожно удалите тампон.

4) Слюна (Lolly-Test)




- 1) Поместите экстракционную пробирку в картонную подставку для пробирок.
- 2) Прижмите кончик языка к нижнему корню челюсти. Кашляйте глубоко. Произнесите звук «киииа», чтобы сконцентрировать слюну.
- 3) Поместите тампон на язык не менее чем на 10 секунд, поверните его 3 или более раз, чтобы полностью впитать слюну.

Тестовая процедура

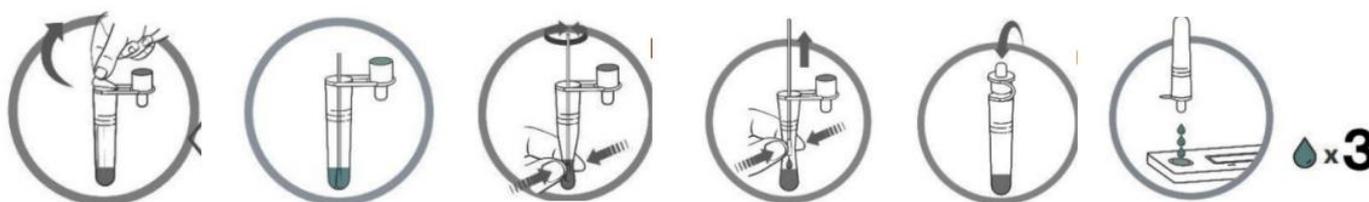

1. Оторвите уплотнение трубки экстракционного буфера.
2. Вставьте тампон в трубку и погрузите тампон вверх и вниз в жидкость не менее чем на 10 секунд. Затем прижмите тампон ко дну пробирки и поверните его на 3 оборота, следя за тем, чтобы содержимое не выплескивалось из пробирки.
3. Выньте стерильный тампон и сожмите кончик тампона, чтобы извлечь из тампона как можно больше жидкости.
4. Затяните колпачок на пробирке для сбора образцов и энергично встряхните пробирку для сбора образцов, чтобы смешать образец и буфер для экстракции образца.
5. Внесите 3 капли (примерно 100 мкл) в лунку для образца на тестовой карточке через наконечник пипетки. прочитайте результаты теста через 15 минут. Не тратьте более 20 минут на чтение результатов.

Интерпретация результатов

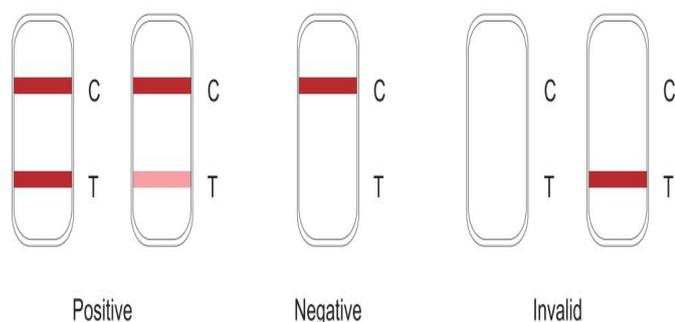

положительный

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

неэффективный

положительный: появляются две линии. Одна цветная линия появляется в области контрольной линии (C), а другая цветная линия появляется в области тестовой линии (T).

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ: в контрольной области (C) появляется цветная линия. В области тестовой линии (T) не появляется видимая цветная линия.

неэффективный: Контрольная линия не появляется. Недостаточный объем пробы или неправильное обращение с ней являются наиболее вероятными причинами отсутствия контрольной линии. Проверьте процедуру и повторите тест с новой тестовой картой.